

目录



CONTENTS

002	牙周探针 Periodontal Probes	2
003	根管充填器 Root-canal Pluggers	3
004	牙探针 Explorers	5
008	牙科树脂充填器 Plastic filling instruments	6
009	牙周锉 Bone files	10
010	牙用充填器 Glass Ionomer Filling Instruments	10
011	剝挖器 Excavators	11
012	粘固粉调刀 Cement Spatulas	12
013	水门汀充填器 Cement Pluggers	12
014	银汞雕刻刀 Amalgam Carvers	13
015	牙科用分离器 Gingival Separators	13
016	牙科洁治器 Scalers	16
017	牙科刮治器 Curettes	18
018	银汞合金充填器 Amalgam Pluggers	21
019	研光器 Burnishers	21
020	牙龈刀 Gum Knife	22
021	牙釉凿 Dental Chisels	23
022	口镜（口镜柄） Mirror Handles	23
023	牙刮匙 Bone Curettes	24
024	技工蜡型雕刻刀 Wax Carvers	28
025	牙科用牵开器 Gingival Retractors	32
029	牙挺（增隙器） Gap Increasing Instrument	32
030	硅橡胶修整器 Silicone Carvers	32

031	牙根尖挺 Apical Elevators	33
033	印模托盘（牙托） Impression Trays	34
034	技工小榔头 Hammers	38
035	石膏锯 Plaster Flame	38
036	煮牙盒 Flask	39
037	牙模复制器 Denture Duplicators	39
038	消毒盒 Sterilization Trays	40
040	银汞合金输送器 Amalgam Carriers	41
041	口镜（口镜头） Mirrors	41
044	成型片夹、成型片 Matrix Retainers	42
045	牙科去冠器 Crown Removers	43
046	拔髓针（拔髓针柄） Nerve Broach	43
047	牙骨锤 Mallets	44
048	牙骨凿 Bone Chisels	45
049	口腔麻醉注射架 Aspirating Syringes	46
049	牙科输送器（琼脂注射器） Agar Impression Syringes	47
050	牙挺 Root Elevators	48
051	丁字形牙挺 Root Elevators type T	51
052	牙科去冠器（开冠型） Spreaders	51
053	牙骨锉 Bone Files	52
054	牙科用分离器（腭裂分离器） Cleft Palate Instrument	52
055	石膏调刀 Plaster Spatulas	53
056	石膏切刀 Plaster Knives	54

059	牙用不锈钢丝 Dental wires	55
060	牙托梗（腭杆） Palatal Bars	56
061	牙托梗（舌杆） Lingual Bars	56
062	牙托梗（扁丝） Occlusal Rests Flat Wire	57
063	牙骨凿（骨劈开凿） Osteotomes	57
065	上颌窦提升器 Sinus Lifting Instruments	58
066	牙用尺 Castroviejo Calipers	59
067	骨粉碗 Bone Powder Bowls	60
068/ 069	牙科骨粉输送器 Bone Powder Pluggers	60
090	牙科用镊 Tweezers	61
091	医用镊（咬合纸镊子） Paper Forceps	62
092	医用镊（敷料镊） Dressing Forceps	63
094	整形镊 Tissue Forceps	63
096	托槽夹持镊 Bracket Forceps	64
100	牙槽咬骨钳 Rongeur Forceps	65
101	拔牙钳（成人型） Extracting Forceps for Adults	66
102	拔牙钳（儿童型） Extracting Forceps for Children	69
103	技工钳 Lab Pliers	70
104	正畸钳 Orthodontics Pliers	72
105	粗丝切断钳 Heavy Cutters	74
106	弓丝成型器 Arch Turret	74
107	正畸带环推置器 Band Pushers	75
109	牙龈剪 Gum Scissors	75

110	牙科去冠器（金冠破除钳） Crown Remover Pliers	75
111	金冠剪 Crown Scissors	76
112	石膏剪 Plaster Shears	76
113	止血钳 Hemostatic Forceps	77
115	手术剪 Surgical Scissors	78
116	眼用剪 Ophthalmic Scissors	79
117	拆线剪 Suture remove Pliers	80
120	持针钳 Needle Holders	80
121	持针钳（镶片持针钳） TC Needle Holders	81
130/ 131	手术刀柄 Scalpel Handles	81
132	刀片安全拆卸器 Scalpel Blade Remover	82
251	磨石 Sharpening Stone	82
252	色码圈 Color Coded Instruments	84
401	拉勾 Retractors	84
407	医用吸引头 Aspirator Tips	85
450	自锁托槽开启工具 Wire Applicators	86
500	器械盘 Cassettes	86
180	配套器械 Other Instruments	87

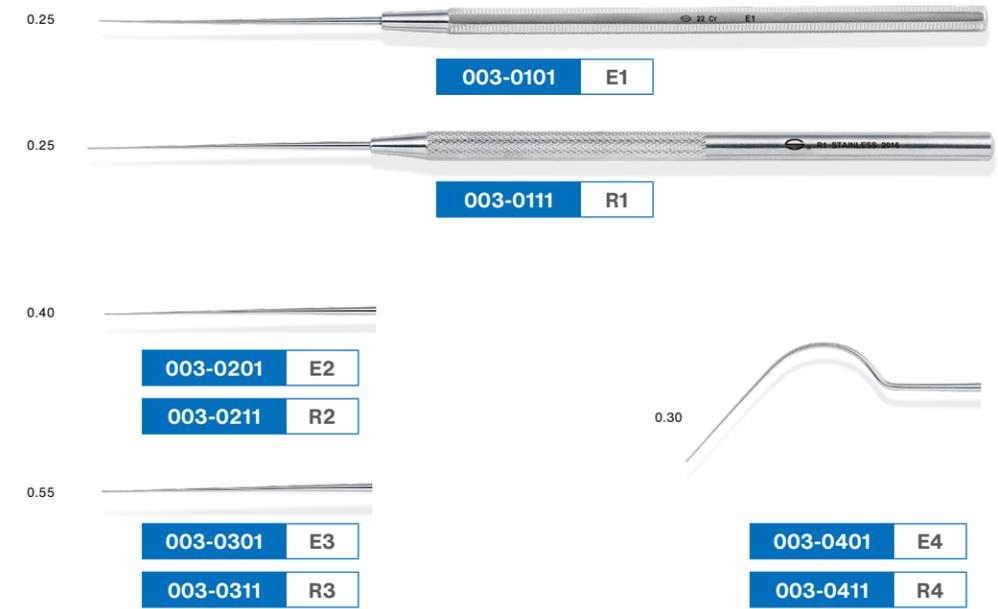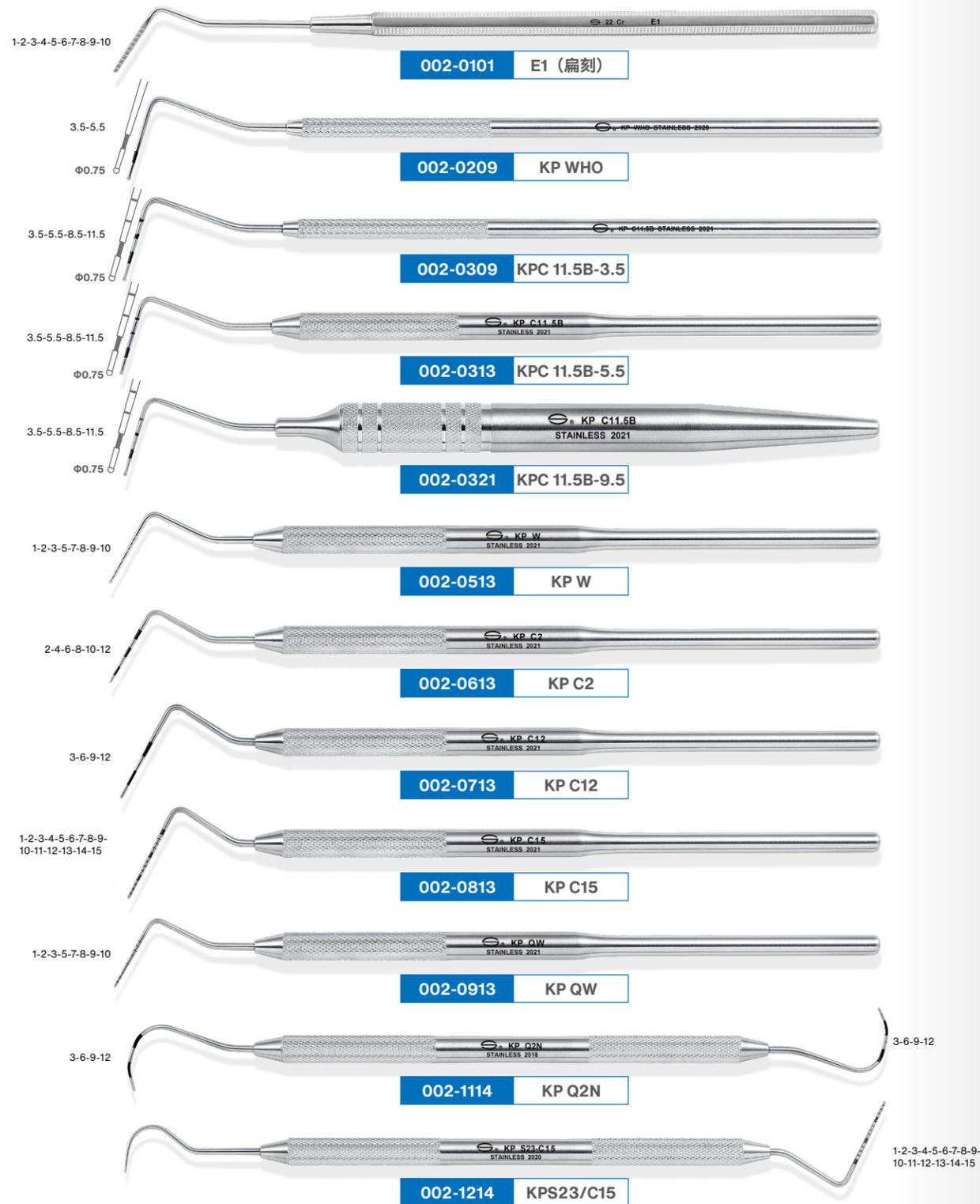

根管充填器 (垂直加压器) Condensers



代码	型号	头端直径
003-1113	KRCP 30	Φ 0.30
003-1213	KRCP 8	Φ 0.40
003-1313	KRCP 8.5	Φ 0.50
003-1413	KRCP 9	Φ 0.60
003-1513	KRCP 9.5	Φ 0.70
003-1613	KRCP 10	Φ 0.80
003-1713	KRCP 10.5	Φ 0.90
003-1813	KRCP 11	Φ 1.00
003-1913	KRCP 11.5	Φ 1.10
003-2013	KRCP 12	Φ 1.20




根管充填器（侧压器） Spreaders




代码	型号	头端直径
003-3113	KRCP S20	Φ 0.20
003-3213	KRCP S25	Φ 0.25
003-3313	KRCP S30	Φ 0.30
003-3413	KRCP S40	Φ 0.40
003-3513	KRCP S50	Φ 0.50
003-3613	KRCP S60	Φ 0.60

根管充填器（垂直加压器） Condensers

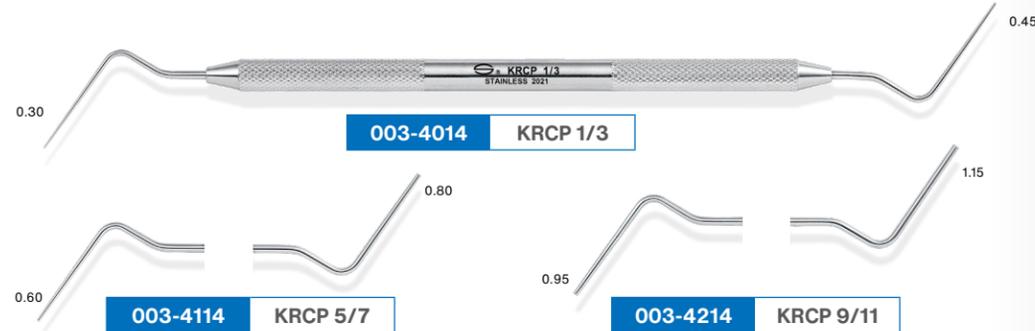

根管充填器 Root-canal pluggers

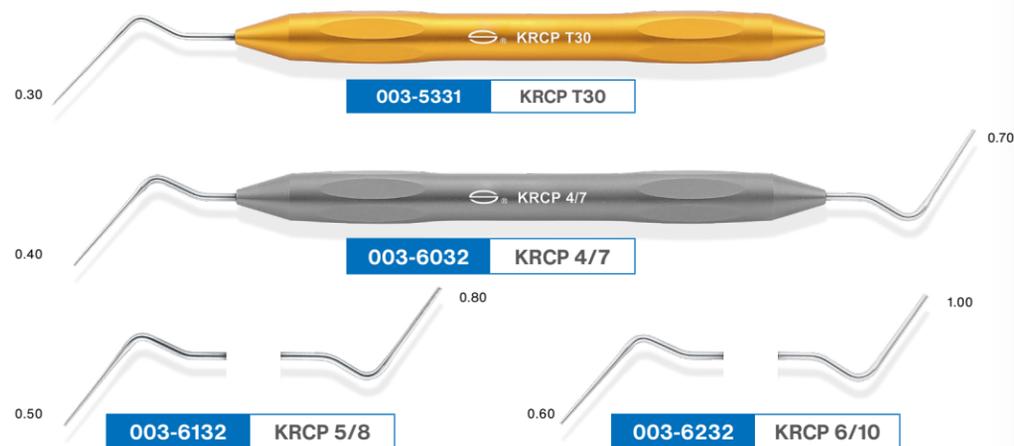

004-6201 E23 八角柄
004-6211 R23 圆柄



004-8313 KEX S23



004-0502 E5



004-1014 KEX D3ES



004-1114 KEX D5




004-1514 KEX D16



004-2132 KEX LD5



004-2532 KEX LD16

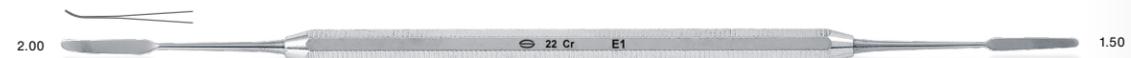

008-0104 E1



008-0118 R1



008-1118 KPFI 1



008-1218 KPFI 2



008-6160 KPFI-GM1



008-6260 KPFI-GM2



008-6360 KPFI-GM3

树脂充填器系列 I 型 Plastic Filling Instruments Set type I



008-2120 KPFI M1



008-2220 KPFI M2



008-2320 KPFI M3



008-2420 KPFI M4



008-2520 KPFI M5




树脂充填器套装

180-3000 I 型 5X1




树脂充填器系列型 II 型 Plastic Filling Instruments Set type II

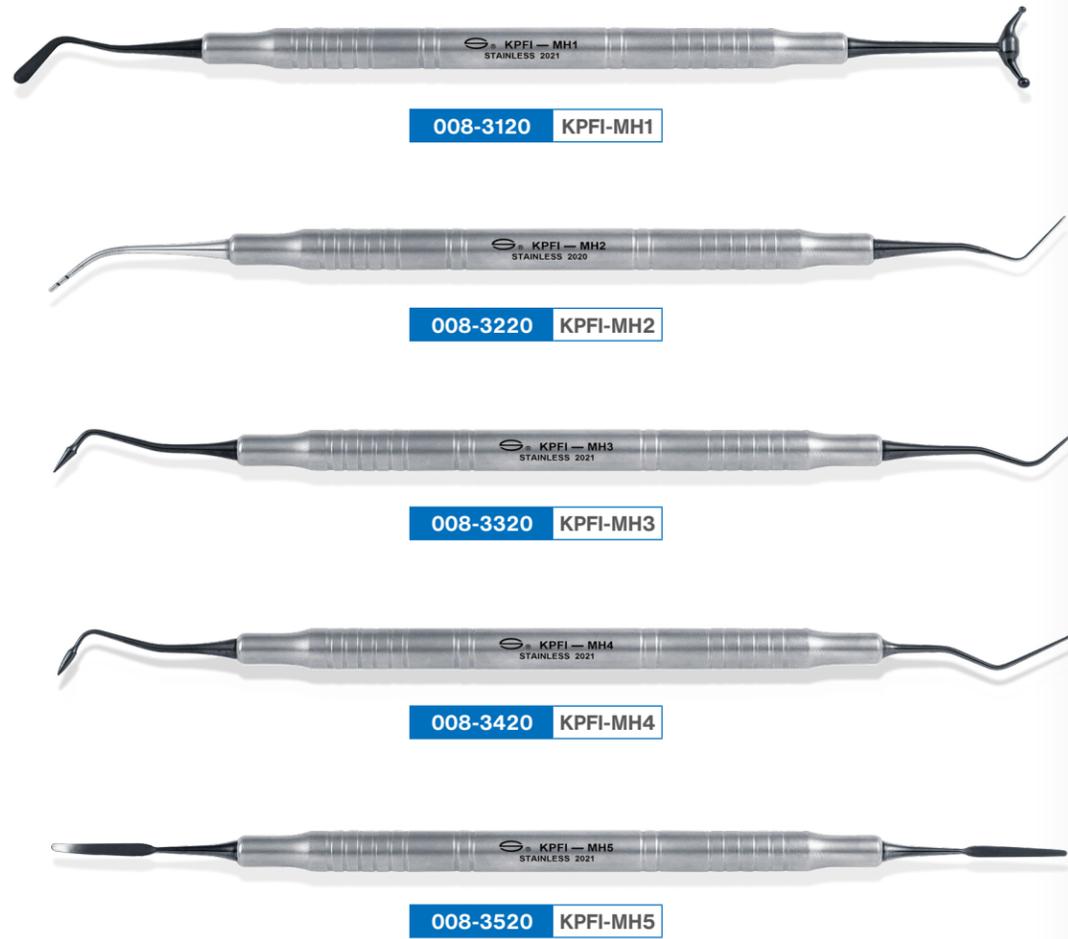

树脂充填器套装

180-2900 II型 5X1(镀层)

树脂充填器系列型 III 型 Plastic Filling Instruments Set type III

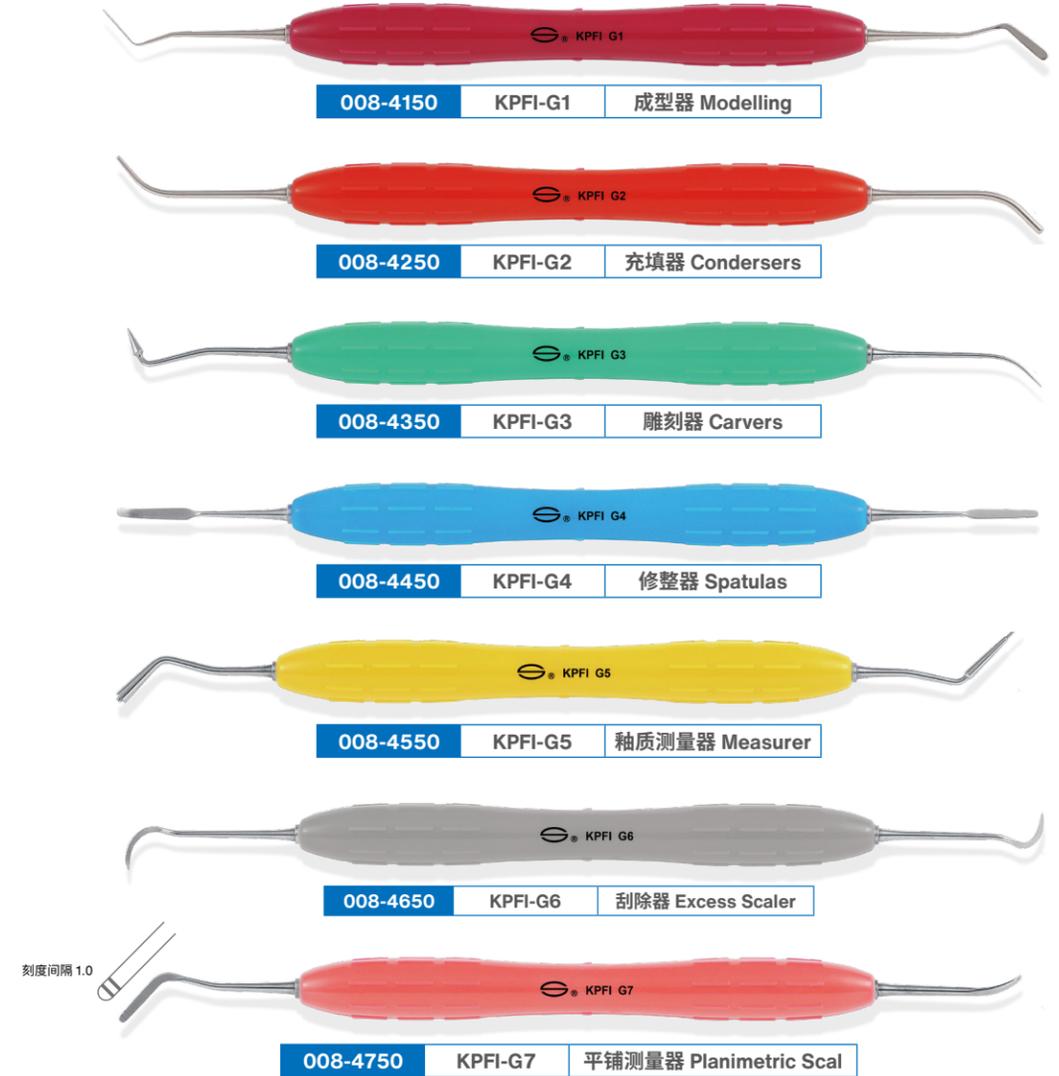

刻度间隔 1.0



树脂充填器套装

180-2800 III型 7X1 硅橡胶手柄

009 牙周锉 Periodontal Files



009-0103 E1




009-0203 E2



009-0303 E3



009-0403 E4

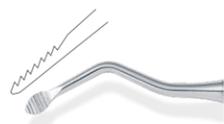

009-0503 E5



009-1020 FS3/4S

010 牙用充填器 Glass Ionomer Filling Instruments



玻璃离子充填器



010-0118 KPICH

011 别挖器 Excavators

011



011-0104 E1



011-0118 R1



011-0204 E2

011-0218 R2



011-0304 E3

011-0318 R3



011-0404 E4

011-0418 R4



011-0504 E5

011-0518 R5



011-0604 E6

011-0618 R6



011-1718 KEXC 17



011-1818 KEXC 18




011-3118 KEXC 31L



011-3218 KEXC 32L



011-3318 KEXC 33L

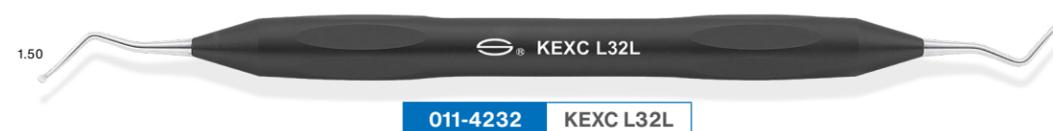

011-4232 KEXC L32L




008-4850 KPFI-G8


012 粘固粉调刀 Cement Spatulas



013 水门汀充填器 Cement Pluggers

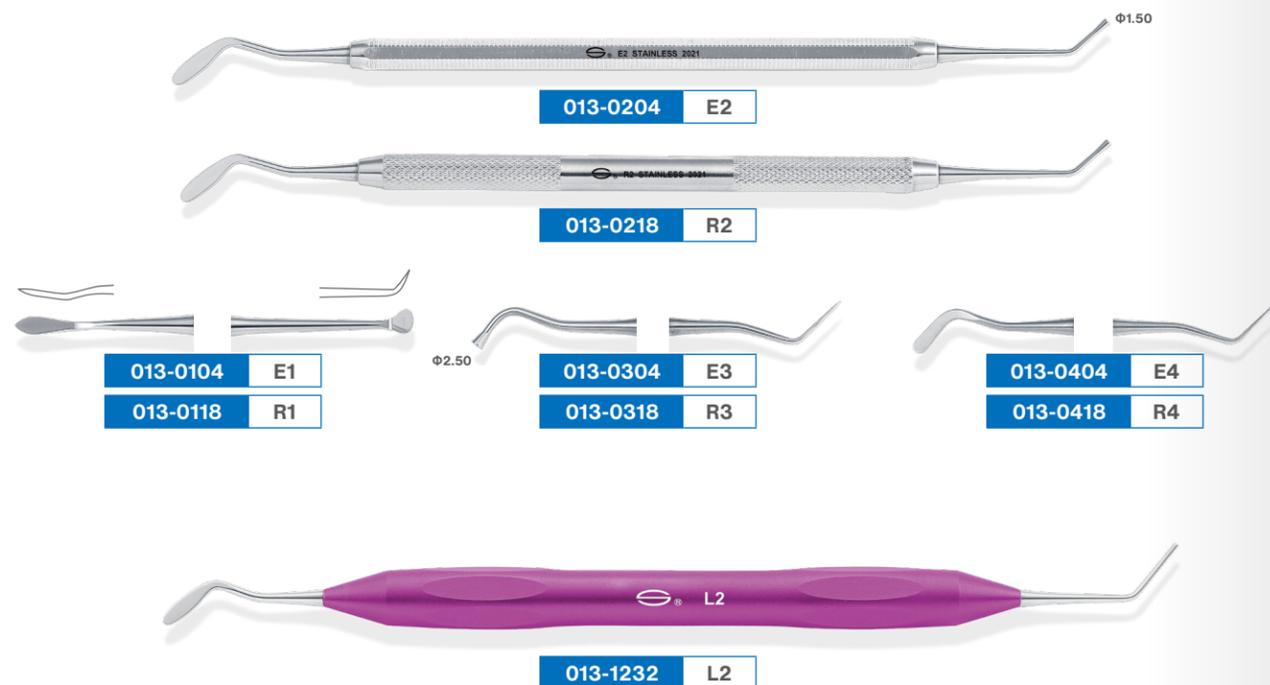

银汞雕刻刀 Amalgam Carvers

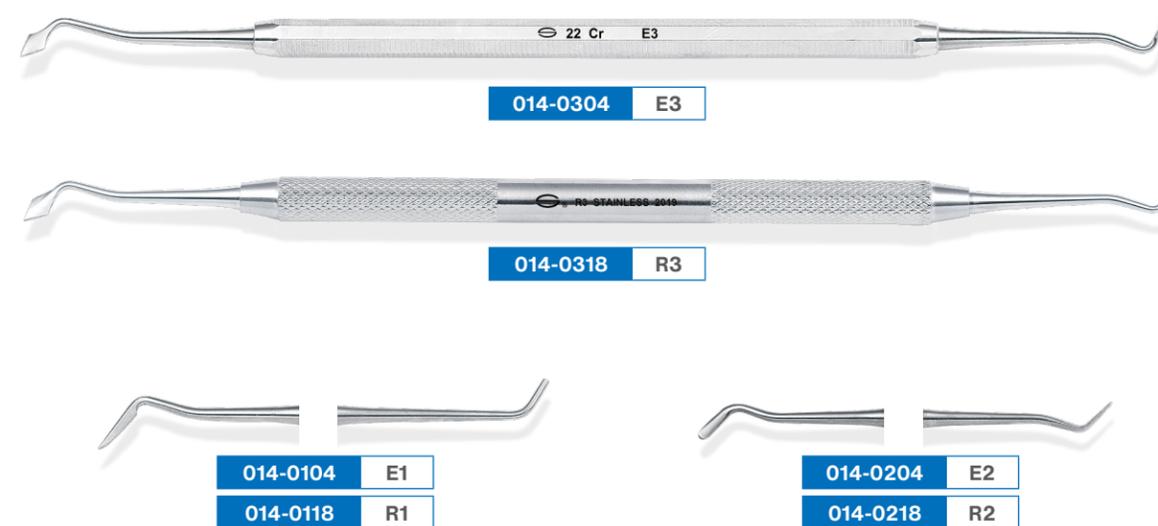

牙科用分离器 Gingival Separators


牙骨膜分离器



牙骨膜分离器 Periosteals



牙龈分离器 Gingival Separators

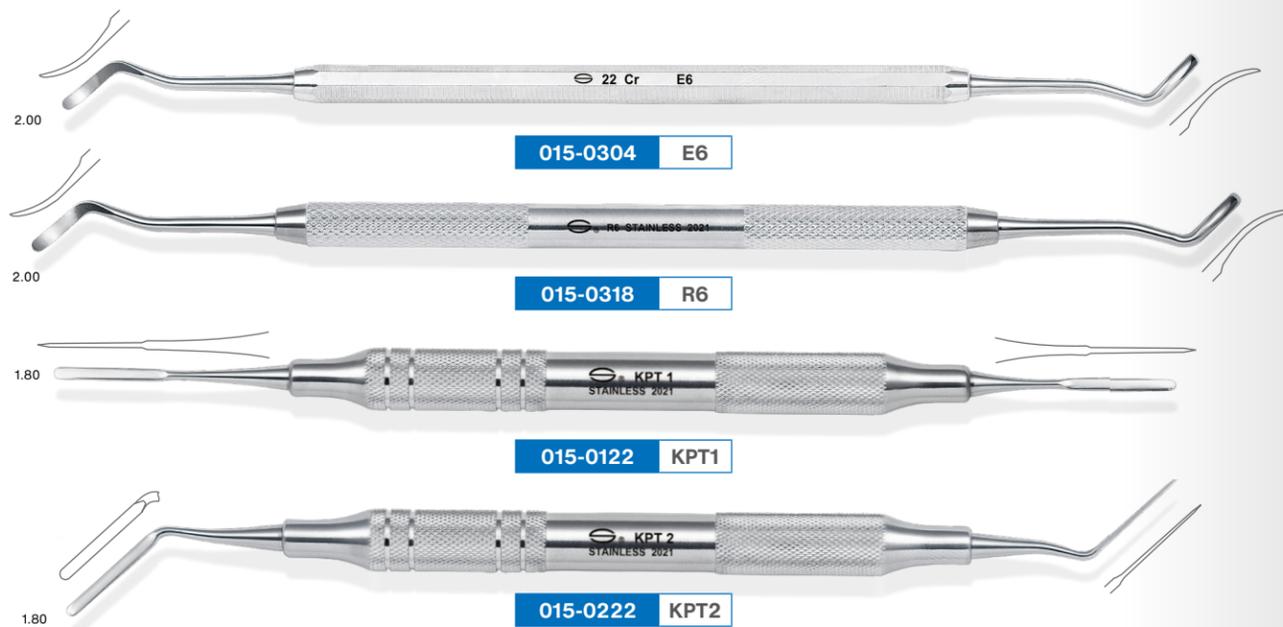

牙龈压排器



软组织刷





016-0103 E1



016-0115 R1



016-0203 E2

016-0215 R2



016-0303 E3

016-0315 R3



016-0403 E4

016-0415 R4



016-0503 E5

016-0515 R5



016-0603 E6

016-0615 R6



016-0703 E7

016-0715 R7



016-0803 E8

016-0815 R8



016-0903 E9

016-0915 R9



016-1003 E22



016-3320 KS H6/7



016-2720 KS JQ30/33



016-2920 KS JQ34/35



016-3020 KS U15/30



016-3220 KS H5/33



016-3520 KS 204S





016-3620 KS 204SD



016-3720 KS B2/3



016-3920 KC MC13S/14S

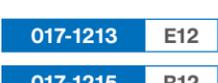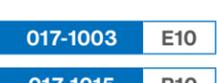

适用于前牙龈下与双尖牙龈下



适用于前牙龈下与尖牙龈下



适用于前牙龈下与尖牙龈下



适用于双尖牙龈下与磨牙颊舌侧龈下



适用于磨牙颊舌侧龈下



适用于后牙近中龈下




适用于后牙远中龈下



适用于后牙近中龈下



适用于后牙远中龈下

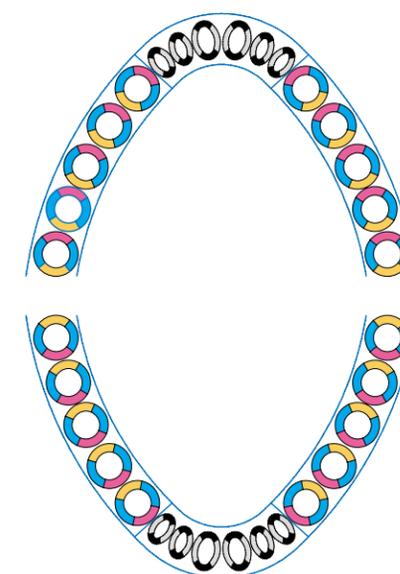


使用部位参考图

上述色彩图片，表示不同器械应用于牙齿的不同部位

- 前牙区
G1/2、G3/4、G5/6
- 颊舌侧
G7/8、G9/10
- 前磨牙、磨牙近中面
G11/12、G15/16
- 前磨牙、磨牙远中面
G13/14、G17/18


017 牙科刮治器 Currettes

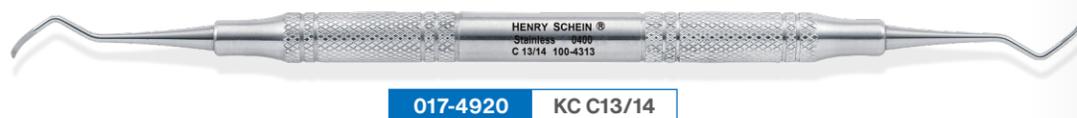

018 银汞合金充填器 Amalgam Pluggers



019 研光器 Burnishers

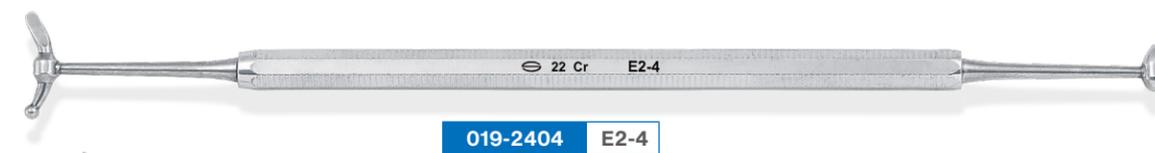

020 牙龈刀 Gum Knife



牙龈切除刀



牙釉凿 Dental Chisels



021




口镜 Mirror Handles



022


口镜柄

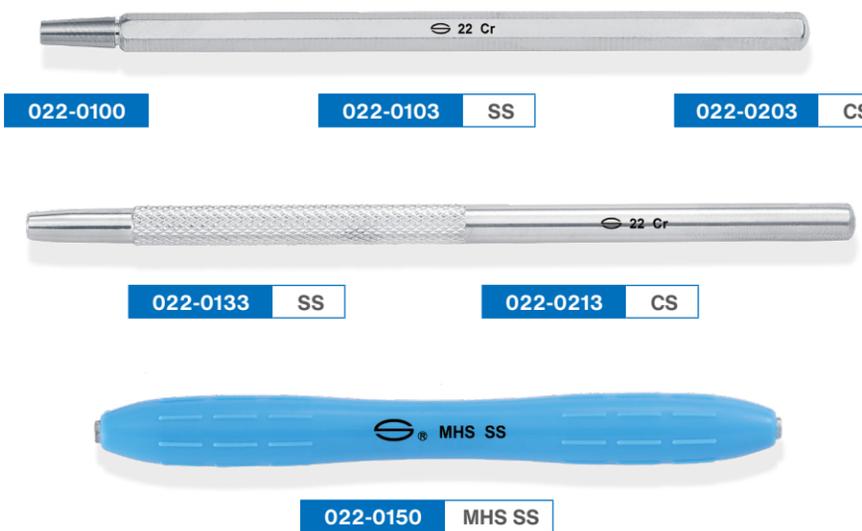

锐匙



扁柄型

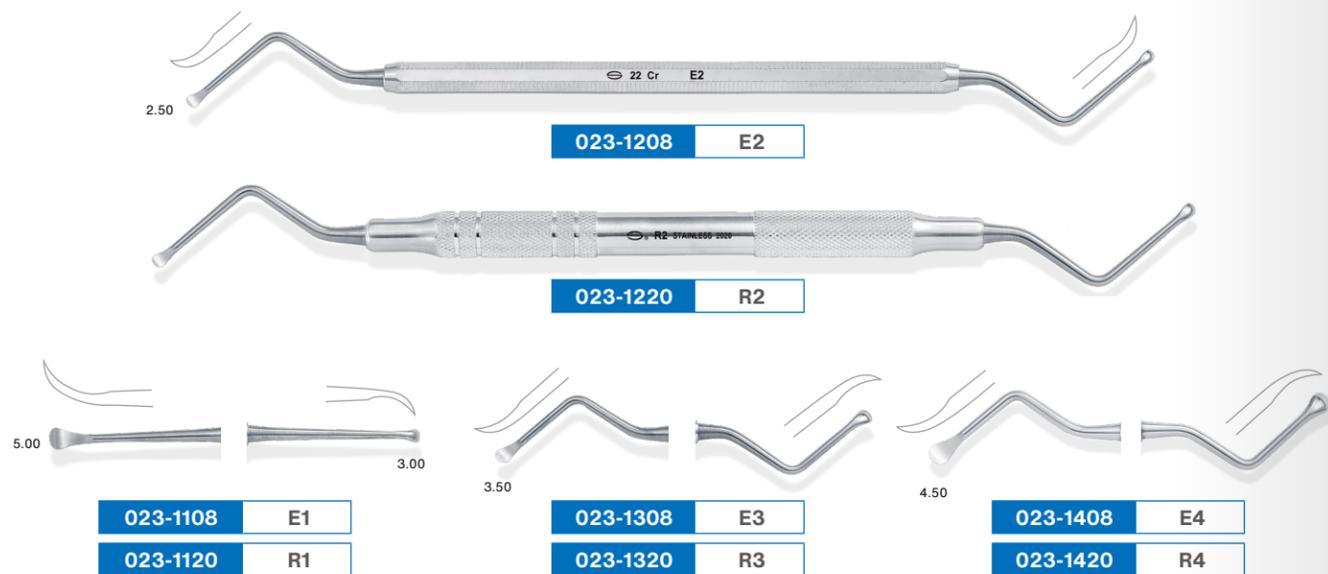



023-3122 KRM 1#



023-3222 KRM 2#



023-3322 KRM 3#



023-3422 KRM 4#



023-3522 KRM 5#



023-4122 KRCL 84C



023-4222 KRCL 85C



023-4322 KRCL 86C




023-4422 KRCL 87C



023-4522 KRCL 88C

滴蜡器

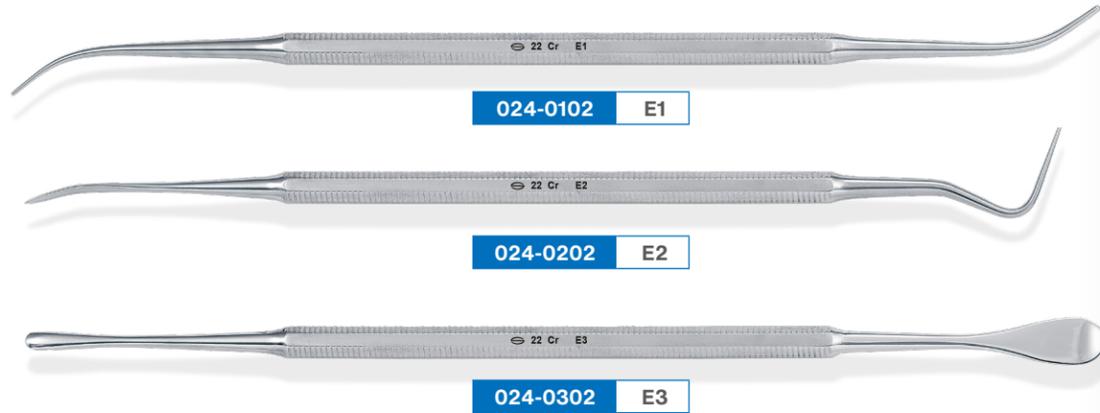

托马斯雕刻刀

烤瓷型



024-5120 KWC PKT1



024-5220 KWC PKT2



024-5320 KWC PKT3



024-5420 KWC PKT4



024-5620 KWC 5

空心柄蜡成形器



024-5720 KWC 6

空心柄蜡成形器



024-5820 KWC 7



024-5920 KWC 8



024-6020 KWC 9

烤瓷雕刻刀



024-6120 KWC 10




024-8300 KWC C3



024-8400 KWC C4



024-8500 KWC C5

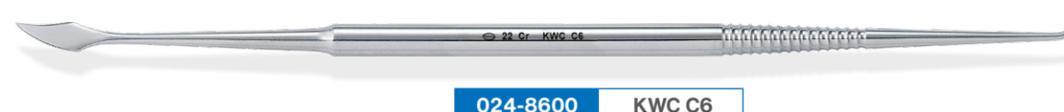

024-8600 KWC C6

烤瓷器 Wax-ceramic Carver



024-8100 KWC C1

弹性烤瓷器 Wax-ceramic Carver



024-8200 KWC C2

025 牙科用牵开器 Gingival Retractors



025-0120 GRM 1



025-0220 GRM 2

029 牙挺 Gap Increasing Instrument



增隙器



029-0101

030 硅橡胶修整器 Silicone carvers



030-0120 R1



030-0220 R2

牙根尖挺 Apical Elevators



031



031-0107 E1



031-0207 E2



031-0307 E3



031-0162 HS1




031-0180 HE1



031-0262 HS2



031-0280 HE2

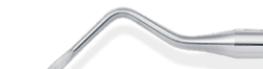

031-0662 HS6



031-0980 HE9



031-0362 HS3



031-0380 HE3



031-0562 HS5



031-1080 HE10



031-0780 HE7



031-0880 HE8

铝制牙托系列（有孔平底） Perforated Aluminium



上口

代码	型号
033-0101	1#
033-0201	2#
033-0301	3#
033-0401	4#
033-0501	5#
033-0601	6#



下口

代码	型号
033-0102	1#
033-0202	2#
033-0302	3#
033-0402	4#
033-0502	5#
033-0602	6#

不锈钢牙托系列（有孔平底） Perforated Stainless Steel



上口

代码	型号
033-3101	1#
033-3201	2#
033-3301	3#
033-3401	4#
033-3501	5#
033-3601	6#



下口

代码	型号
033-3102	1#
033-3202	2#
033-3302	3#
033-3402	4#
033-3502	5#
033-3602	6#

铝制牙托系列（无孔圆底） Non-Perforated Aluminium



上口

代码	型号
033-1101	1#
033-1201	2#
033-1301	3#



下口

代码	型号
033-1102	1# 下口
033-1202	2# 下口
033-1302	3# 下口

不锈钢牙托系列（无孔平底） Non-Perforated Upper Stainless Steel



上口

代码	型号
033-4101	1#
033-4201	2#
033-4301	3#



下口

代码	型号
033-4102	1#
033-4202	2#
033-4302	3#

不锈钢牙托系列（有孔圆底） Stainless Steel



上口

代码	型号
033-6101	1#
033-6201	2#
033-6301	3#



下口

代码	型号
033-6102	1#
033-6202	2#
033-6302	3#

不锈钢牙托系列（无孔圆底） Stainless Steel



上口

代码	型号
033-7101	1#
033-7201	2#
033-7301	3#



下口

代码	型号
033-7102	1#
033-7202	2#
033-7302	3#

铝制 Aluminium



033-2101 局部左 Left



033-2201 局部右 Right



033-2301 活动式 Premolars

不锈钢 Stainless Steel



033-5101 局部左 Left



033-5201 局部右 Right



033-5301 活动式 Premolars

034 技工小榔头 Hammers



034-0200 大号

035 石膏锯 Plaster Flame



035-0100 锯架 flame



035-0200 锯条 saw blades

煮牙盒 Flask



036

铜制煮牙盒



036-0702 7#



036-0802 8#

牙模复制器 Denture Duplicator



037



037-0100



038 消毒盒 Sterilization trays




038-0100 5×1
205x66.5x23mm



038-0200 10×1
205x121.5x23mm



039-0202 10×1 III型
III型 type III
210x140x30mm

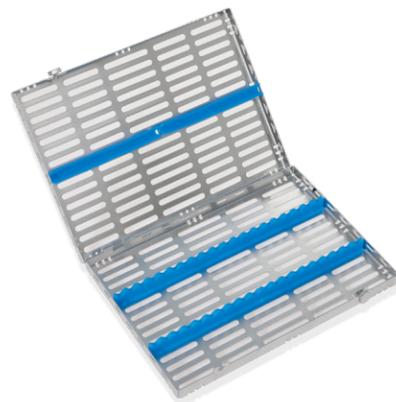

038-0300 20×1
I型 type I
297x205x36mm



038-0400 20×1
II型 type II
297x205x36mm



038-1000 塑料 5×1
(可高温高压消毒塑料)
autoclavable
205x75x25mm



038-2000 塑料 10×1
(可高温高压消毒塑料)
autoclavable
205x135x30mm

银汞合金输送器 Amalgam Carriers



040



040-0102 KAC A 铜制



040-0203 KAC B 不锈钢制

口镜 Mirrors



041

口镜头



代码	型号	
041-0103	3#	BJFP (精品平光)
041-1103	4#	FP (平光)
041-1113	4#	BFP (平光)
041-1203	4#	FF (放大)
041-1303	4#	JFP (精品平光)
041-1313	4#	BJFP (精品平光)
041-1403	4#	JFF (精品放大)
041-1503	4#	FS (铱镜 FS 平光) Rhodium mirror
041-2103	5#	FP (平光)
041-2203	5#	FF (放大)
041-2303	5#	JFP (精品平光)
041-2403	5#	JFF (精品放大)



041-1513 4#
ZFS (铱镜 ZFS 平光) Rhodium mirror

044 成形片夹 Matrix Retainer



044-0100 钳式



37mmx9.8mm

044-0101 1#

20片 / 袋



27mmx8mm

044-0102 2#

20片 / 袋



25mmx6.5mm

044-0103 3#

20片 / 袋



044-0200 杆式 Toffelemire



2#

64mmx6.5mm




1#

64mmx6.5mm

044-0201 1# 2#

20片 / 袋


成型片 (豆瓣式) Bean flap type

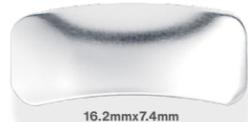

16.2mmx7.4mm

044-0301 1#

30片 / 盒

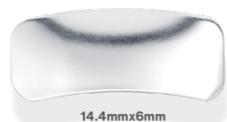

14.4mmx6mm

044-0302 2#

30片 / 盒



14.4mmx5.3mm

044-0303 3#

30片 / 盒

牙科去冠器 Crown Remover



045



045-0100 3×1



045-0101 直头



045-0102 弯头

拔髓针 Nerve Broach



046

拔髓针柄



046-0100 I型



047-0100 II型

牛角



047-0200 I型

紫铜



047-0300 III型

不锈钢



048-0130 R1



048-0230 R2



048-0330 R3



048-0430 R4



048-0530 R5



048-0630 R6 峨嵋骨凿



048-0242 2#



048-0342 3#



048-0442 4#



049-0100 KAS C/W

尖头



049-0200 KAS C/W

钩头



049-0500 KAS C/W2

不锈钢



049-0600 KAS C/W3

精品不锈钢



琼脂注射器



049-100 Q



049-1001 针头

Φ0.8 Needle



049-1002 针头

Φ1.2 Needle



050-0160 1# SS2.5



050-0260 2# SS3



050-0360 3# SS4



050-0460 4# SC3



050-0560 5# SC4



050-0660 6# SC5



050-1060 S4



050-1160 S5



050-4160 S8



050-4260 S9



050-4360 S302



050-4460 S303



050-6160 S27



050-6260 S28



050-6360 S27S



050-6460 S28S

直头 (用于前牙) Straight



050-0180 ES2



050-0280 ES2.5



050-0380 ES3



050-0480 ES3.5



050-0580 ES4



050-0680 ES4.5



050-0780 ES5

弯头 (用于后牙) Curved



050-2180 EC2



050-2280 EC2.5



050-2380 EC3



050-4380 E302



050-2480 EC3.5



050-2580 EC4



050-4480 E303



050-2680 EC4.5



050-2780 EC5



微型牙挺 (微创) Luxating Elevators



050-5280 KEL S2.5



050-5380 KEL S3



050-5480 KEL S3.5



050-5580 KEL S4



050-5780 KEL S5



050-6280 KEL C2.5



050-6380 KEL C3



050-6480 KEL C3.5



050-6580 KEL C4



050-6780 KEL C5

阻生齿牙挺 Wisdom Tooth Elevators



050-7080 KWTE 2.5



050-7180 KWTE 3



050-7280 KWTE 4



050-7380 KWTE 5



050-7480 KWTE 3.5



051-0161 1#



051-0261 2#



051-0361 3#



051-0461 4#

牙科去冠器 Spreaders



开冠型 Crown Remover



厚度: 0.80

052-0201 3#

(II型直头) straight

厚度: 0.80



052-0202 4#

(II型弯头) curved

053 牙骨锉 Bone Files



053-0140 1#

053-0240 2#

054 牙科用分离器 Cleft Palate Instrument



腭裂分离器 Cleft Palate Instrument

鼻侧粘膜



054-0141 1#



054-0241 2#

血管神经



054-0341 3#



054-0441 4#

腭粘骨膜



054-0541 5#

石膏调刀 Plaster Spatulas



055



055-0101 S1R 塑料柄

055-0100 1R



055-0200 2R



055-0300 3R



055-0400 4R



055-0800 8R



055-1000 10R



055-1100 11R



055-1300 13R



056-0500 5R



056-0600 6R



056-0700 7R



056-0900 9R




056-1200 12R

牙用不锈钢丝系列



代码	重量 (g)	直径 (mm)
059-1230	30	Φ1.20
059-1830	30	Φ1.80

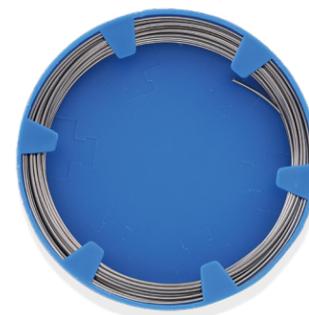

代码	重量 (g)	直径 (mm)
059-0550	50	Φ0.50
059-0650	50	Φ0.60
059-0750	50	Φ0.70
059-0850	50	Φ0.80
059-0950	50	Φ0.90
059-1050	50	Φ1.00

结扎丝系列



代码	重量 (g)	直径 (mm)
059-2020	20	Φ0.20
059-2520	20	Φ0.25
059-3020	20	Φ0.30
059-4020	20	Φ0.40






上口 (腭杆)



上口

代码	型号
060-0100	大号 L
060-0200	中号 M
060-0300	小号 S

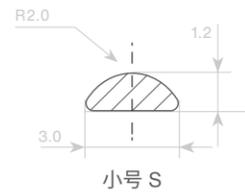
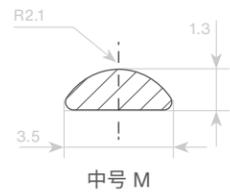
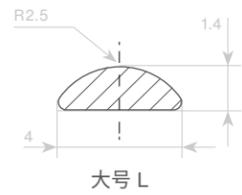


下口 (舌杆)



下口




代码	型号
061-0100	大号 L
061-0200	中号 M
061-0300	小号 S

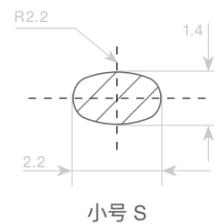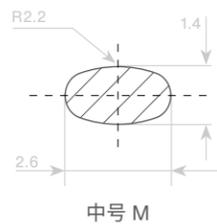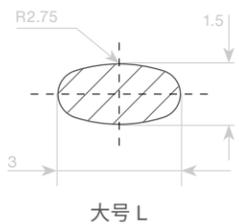

通用型 (扁丝)



代码	型号
062-0100	通用 (大号)
062-0200	通用 (中号)
062-0300	通用 (小号)

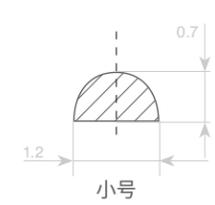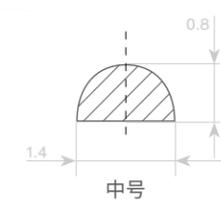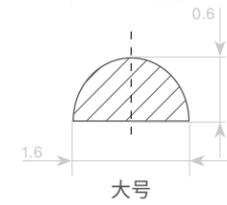

骨劈开凿



065 上颌窦提升器 Sinus Lifting Instruments



065-2501 KNTS 25



065-3001 KNTS 30



065-3501 KNTS 35



065-4001 KNTS 40

066 牙用尺 Castrovejio Caliper



066



066-0100 SDC



测量 0-20mm

066-0101 KDC 1 弯

066-0102 KDC 1 直



测量 0-40mm

066-0200 KDC 2 弯

066-0201 KDC 2 直



测量 0-40mm

066-0300 KDC 3 弯

066-0301 KDC 3 直



测量 0-40mm

066-0400 KDC 4 弯

066-0401 KDC 4 直



067-0100



068-0100 G



069-0100 I型



069-0300 III型



普通型

代码	型号
090-0200	双弯无定位 without pin
090-0201	双弯有定位 with pin
090-0300	双弯无定位 (带齿) without pin with serrations
090-0301	双弯有定位 (带齿) with pin with serrations



精品 I 型

代码	型号
090-1200	双弯无定位 (无齿) without pin without serrations
090-1201	双弯有定位 (无齿) with pin without serrations
090-1300	双弯无定位 (带齿) without pin with serrations
090-1301	双弯有定位 (带齿) with pin with serrations



精品 II 型

代码	型号
090-2200	双弯无定位 without pin
090-2201	双弯有定位 with pin
090-2300	双弯无定位 (带齿) without pin with serrations
090-2301	双弯有定位 (带齿) with pin with serrations



咬合纸镊子 Articulating Paper Forceps



091-0100 直 155mm Straight



091-0200 弯 160mm Curved



091-0300 双头 145mm Double Tips



敷料镊



代码	型号
092-1250	125#
092-1400	140#
092-1600	160#
092-1800	180#
092-2000	200#
092-2200	220#
092-2500	250#

整形镊 Tissue Forceps



有齿

代码	型号
094-1000	0.60mm
094-1008	0.80mm
094-1010	1.00mm
094-1012	1.20mm



有钩

代码	型号
094-2000	0.60mm
094-2008	0.80mm
094-2010	1.00mm
094-2012	1.20mm



096-0100 1# 11cm



096-0200 2# 12.5cm



096-0300 3# 12.5cm



096-0400 4# 13cm



096-0500 5# 14cm



096-0600 ZS6



100-0200 I 方口

头宽 4.40



100-0100 I 圆口

头宽 4.40



100-0101 II 圆口

头宽 3.80



101-0101 1
321 | 123
拔除上颌切牙



101-0301 17
76 | 67
拔除下颌磨牙



101-0401 23
76 | 67
拔除下颌磨牙



101-0501 32
54 | 45
拔除上颌双尖牙及牙根



101-0601 44
21 | 12
拔除下颌切牙及牙根



101-0701 46
21 | 12
拔除下颌切牙



101-0801 48
543 | 345
拔除下颌牙根



101-0901 53L
67
拔除上颌左侧 1、2 磨牙



101-1001 53R
67
拔除上颌右侧 1、2 磨牙



101-1101 65
R | R
拔除上颌牙根



101-1301 88L
765
拔除上颌左侧 1、2 磨牙



101-1401 88R
567
拔除上颌右侧 1、2 磨牙



101-1701 222
8 | 8
拔除下颌第三磨牙



101-1201 69
R | R
拔除碎片或小牙根



101-0201 8
54 | 45
拔除上颌双尖牙



101-1501 150
5-1 | 1-5
拔除上颌双尖牙及切牙



101-1601 151
5-1 | 1-5
拔除下颌双尖牙及切牙





103-1301 113
(梯形钳)



103-0701 107
(成形钳)



103-1401 114
(成形钳)



103-1501 115
(成形钳)



103-1601 116
(卡环钳)



103-1801 118
(成形钳)



103-2001 120
(成形钳)



103-2101 121
(成形钳)



103-2201 122
(成形钳)



103-3401 134
(日月钳)



103-3701 137
(成形钳)



103-3901 139
(成形钳)



103-4701 147
(成形钳)



103-2702 127
(三德钳)



04-0103 两用钳 105g

用于弯制各类弓丝不同弧度的精细弯曲及弯制各类弹簧曲，钳喙中部设计有硬而锋利的刃口，方便切除多余钢丝末端。



104-0203 细丝弯制钳 134

用于弯制各类弓丝不同弧度的精细弯曲及弯制各类弹簧曲。



104-0303 末端切断钳 200

用于切断过长的弓丝末端，且能安全夹住剪下部分。剪切扎口在0.5mm以下。(刃口镶嵌硬质合金)



104-0403 细丝切断钳 201

用于切断直径0.3mm以下的结扎丝、橡皮圈等(不能用来剪切主弓丝)。(刃口镶嵌硬质合金)



104-0503 转矩形成钳 210

用于弯制形成方丝转矩,成对使用。



104-0603 托槽去除钳 231

用于拆除各种型号的前牙托槽。



104-0703 垂直曲弯制钳 1009

用于弯制矫治弓丝上下不同高度的垂直曲。



104-0803 带环去除钳 3471

用于去除后(前)牙区的带环及去除直接粘于牙齿的托槽附件等。



104-1003 分牙圈放置钳 151

前端弯曲，能将分牙用橡皮圈置入磨牙接触点下方。



104-1103 末端回弯钳 502

用于弯曲镍钛矫治弓丝末端，避免弓丝尖头扎伤口腔软组织，可弯制最大直径为 $\phi 0.021 \times 0.53\text{m}$ 的镍钛丝。



104-1603 后牙托槽去除钳 64#

用于拆除各种型号的后牙托槽。



104-1703 剃形钳 49#

用于弯制多曲方丝弓各类固定直径的小圆形曲，弯曲真径 $\phi 2\text{mm}$ 、 $\phi 3.2\text{mm}$ 、 $\phi 4.2\text{mm}$ 。



104-1803 粘结剂去除钳 68#

用于刮除牙面正畸粘接剂而不损伤牙轴质。



104-1903 小日月钳 101

用于弯制弓丝小曲，特别是末端的停止曲和 Ω 曲等。



104-2003 V形钳 217

在弓丝上制作V形停止曲，包括NITI弓丝，以防止弓丝位移。



104-2103 末端切平钳 252

末端切断并夹持弓丝，与颊面管末端弓丝孔齐平。



104-2203 温氏钳 HW

用于弯曲矫治弓丝末端，避免弓丝尖头扎伤口腔软组织。



104-2303 打孔钳 YX1

在隐形矫治器龈向边缘可剪出一个半圆形缺口，为牙面粘接舌侧扣提供空间，从而不影响佩戴；另外可剪掉需要软组织缓冲的部位，防止隐形矫治器压迫牙龈。



104-2403 水平钳 YX2

在隐形矫治器上夹出水平的凹陷来实现对个别牙根的转矩加力，还可以在倒凹处或者附件眼向夹出凹陷，增加隐形矫治器或保持器的固位。



104-2503 垂直钳 YX3

在隐形矫治器上夹出竖向的凹陷来提高对扭转牙的控制。



104-2603 泪滴钳 YX4

在隐形矫治器任何需要弹性牵引的龈向边缘钳出泪滴形缺口，以便勾住弹性皮圈，配合其它粘接附件，更好的使用弹性牵引。

105 粗丝切断钳 Heavy Cutter



105-0100

用于切断直径 0.8mm 以下各种
澳丝、镍钛丝、不锈钢丝。



105-0101 精品

106 弓丝成型器 Arch Turret



106-0100 无转矩 I 型

106-0200 转矩 I 型



106-0300 无转矩 II 型

106-0400 转矩 II 型

正畸带环推置器 Band Pusher



107



107-0160 2#

(空心六角柄)

牙龈剪 Gum Scissors



109



109-0100 直头 straight

109-0102 直头 straight (无镀层)



109-0101 直头 straight (镶片)



109-0200 弯头 curved

109-0202 弯头 curved (无镀层)



109-0201 弯头 curved (镶片)

牙科去冠器 Crown Remover Pliers



110

金冠破除钳 Crown Remove Pliers



110-0100



110-0101

111 金冠剪 Crown Scissors



代码	型号
111-0100	直头
111-0200	弯头
111-0102	直头 (无镀层)
111-0202	弯头 (无镀层)

代码	型号
111-0101	直头 (镀片)
111-0201	弯头 (镀片)

112 石膏剪 Plaster Shear



112-2000	20cm
112-1600	16cm

止血钳 Hemostatic Forceps



113



止血钳 (无镀层)

代码	型号
113-1254	12.5cm 直型 (无镀层) straight no plated
113-1255	12.5cm 弯型 (无镀层) curved no plated
113-1404	14cm 直型 (无镀层) straight no plated
113-1405	14cm 弯型 (无镀层) curved no plated
113-1604	16cm 直型 (无镀层) straight no plated
113-1605	16cm 弯型 (无镀层) curved no plated
113-1804	18cm 直型 (无镀层) straight no plated
113-1805	18cm 弯型 (无镀层) curved no plated

止血钳 (精品)

代码	型号
113-1252	12.5cm 直型 (精品) straight with fine teeth
113-1253	12.5cm 弯型 (精品) curved with fine teeth
113-1402	14cm 直型 (精品) straight with fine teeth
113-1403	14cm 弯型 (精品) curved with fine teeth
113-1602	16cm 直型 (精品) straight with fine teeth
113-1603	16cm 弯型 (精品) curved with fine teeth
113-1802	18cm 直型 (精品) straight with fine teeth
113-1803	18cm 弯型 (精品) curved with fine teeth
113-2002	20cm 直型 (精品) straight with fine teeth
113-2003	20cm 弯型 (精品) curved with fine teeth
113-2200	22CM 直型 (精品) straight

止血钳

代码	型号
113-1250	12.5cm 直 straight
113-1251	12.5cm 弯 curved
113-1400	14cm 直 straight
113-1401	14cm 弯 curved
113-1600	16cm 直 straight
113-1601	16cm 弯 curved
113-1800	18cm 直 straight
113-1801	18cm 弯 curved
113-2200	22cm 直 straight



代码	型号
115-1251	12.5cm 直 straight
115-1252	12.5cm 弯 curved
115-1401	14cm 直 straight
115-1402	14cm 弯 curved
115-1601	16cm 直 straight
115-1602	16cm 弯 curved
115-1801	18cm 直 straight
115-1802	18cm 弯 curved
115-1261	12.5cm 直尖 (无镀层) straight no plated
115-1262	12.5cm 弯尖 (无镀层) curved no plated
115-1411	14cm 直尖 (无镀层) straight no plated
115-1422	14cm 弯尖 (无镀层) curved no plated
115-1611	16cm 直尖 (无镀层) straight no plated
115-1612	16cm 弯尖 (无镀层) curved no plated
115-1811	18cm 直尖 (无镀层) straight no plated
115-1812	18cm 弯尖 (无镀层) curved no plated



代码	型号
116-1001	10cm 直尖头 straight
116-1002	10cm 弯尖头 curved
116-1021	10cm 直尖头 (无镀层) straight no plated
116-1022	10cm 弯尖头 (无镀层) curved no plated



代码	型号
116-1011	10cm 直尖头 (精品) straight with TC tip
116-1012	10cm 弯尖头 (精品) curved with TC tip

117 拆线剪 Suture Remover Pliers



代码	型号
117-0900	9cm
117-1250	12.5cm
117-1400	14cm (长刃)
117-1401	14cm (短刃)
117-1600	16cm (长刃)
117-1601	16cm (短刃)

120 持针钳 Needle holder



代码	型号
120-1250	12.5cm 细
120-1400	14cm 细
120-1401	14cm 粗
120-1600	16cm 细
120-1601	16cm 粗
120-1800	18cm 细
120-1801	18cm 粗
120-1410	14 细针 弯
120-1411	14 粗针 弯
120-1610	16 细针 弯
120-1611	16 粗针 弯
120-1254	12.5cm 细针 (无镀层)
120-1255	12.5cm 粗针 (无镀层)
120-1404	14cm 细针 (无镀层)
120-1405	14cm 粗针 (无镀层)
120-1604	16cm 细针 (无镀层)
120-1605	16cm 粗针 (无镀层)
120-1804	18cm 细针 (无镀层)
120-1805	18cm 粗针 (无镀层)

代码	型号
120-1252	12.5cm 细针 (精品)
120-1253	12.5cm 粗针 (精品)
120-1402	14cm 细针 (精品)
120-1403	14cm 粗针 (精品)
120-1602	16cm 细针 (精品)
120-1603	16cm 粗针 (精品)
120-1802	18cm 细针 (精品)
120-1803	18cm 粗针 (精品)

持针钳 TC Needle Holders



121

镶片持针钳



代码	型号
121-1250	12.5cm 细 (直型) straight
121-1251	12.5cm 粗 (直型)
121-1400	14cm 细 (直型) straight
121-1401	14cm 粗 (直型)
121-1600	16cm 细 (直型) straight
121-1601	16cm 粗 (直型)
121-1800	18cm 细 (直型) straight
121-1801	18cm 粗 (直型)



代码	型号
121-2400	14cm 细 (端式) Mathieu
121-2401	14cm 粗 (端式)
121-2600	16cm 细 (端式) Mathieu
121-2601	16cm 粗 (端式)

手术刀柄 Scalpel Handle



130/131



130-0300 3#



130-0301 R3



131-0300 X3



132-0100 刀片安全拆卸器



矩形




梯形



圆形

代码	型号
251-0000	刀架 +3# 矩形磨石 Sharpening Guider set
251-0100	1# (圆形)
251-0200	2# (梯形)
251-0300	3# (矩形)

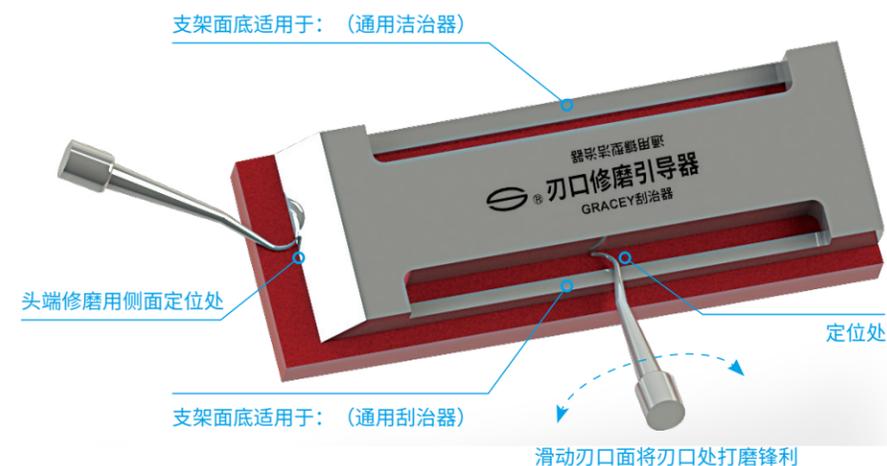

使用方法:

- ① 放一块磨石在引导器下,用大拇指固定住
- ② 选任一需要修磨刃口的通用洁治器,刮治器将刃口背部放置到定位处
- ③ 将头径依靠在支架部位
- ④ 来回划动刃口面将刃口磨锋利
- ⑤ 头端修磨锋利用侧面定位

磨石的使用

磨石(又称油石): 使用于一些有刃口器械, 如剔刮器、牙周病刮匙、牙科刮治器、牙科洁治器、牙龈刀、牙龈切除刀、牙刮匙、牙骨凿等器械, 特别是牙周病刮匙、牙科刮治器、牙科洁治器与牙龈刀, 它们经过几次使用或长时间使用出现了器械刃口变钝, 给以后的临床使用带来不便, 出现工作效率低, 病人痛苦加重、工作质量下降, 这时这些器械需要刃磨, 使它们恢复锋利。


磨石的日常保管

不用时将磨石放入较稀的机油内, 如缝纫机油等, 这样能使磨石耐用, 而保持较为锋利(在使用时可将表面机油清除)。

修磨器械的方法


1. 将需要修磨的刃面贴紧磨石面, 如修磨刃面为平面时则往复移动磨石或移动器械都可以, 看您习惯哪一种方法。如修磨刃面为弧形面时, 则在往复移动磨石时还需相应摆动磨石, 使整个刃面得到修磨。
2. 将圆形磨石贴紧需要修磨器械的凹形弧面, 然后往复移动磨石或器械, 修磨至刃口发亮的棱线消失或基本消失。

以牙龈下刮匙为例

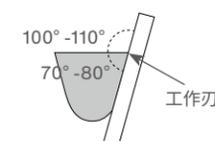


正确的角度

刮匙的匙面与油石的夹角为 70° - 80°

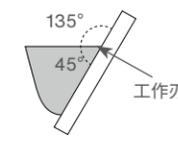

成角过小

刮匙的匙面与油石的夹角小于 70°, 出现刀刃过薄造成器械容易磨损

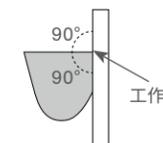

成角过大

刮匙的匙面与油石的夹角大于 80°, 刀刃过厚, 不利于牙石的刮除



代码	型号
252-0000	什锦 (160 只装) assorted
252-0100	绿色 (100 只装) Green
252-0200	蓝色 (100 只装) Blue
252-0300	紫色 (100 只装) Purple
252-0400	粉红色 (100 只装) Pink
252-0500	红色 (100 只装) Red
252-0600	灰色 (100 只装) Grey
252-0700	桔黄色 (100 只装) Orange
252-0800	黄色 (100 只装) Yellow



唇颊拉钩



401-0301 小弯 small



401-0323 大弯 Large

口角拉钩



401-0303



407-0102 I型 铜质



407-0202 I型 不锈钢



407-0203 II型 不锈钢




407-0204 III型 不锈钢

450 自锁托槽开启工具 Wire Applicator



450-2722 KT5

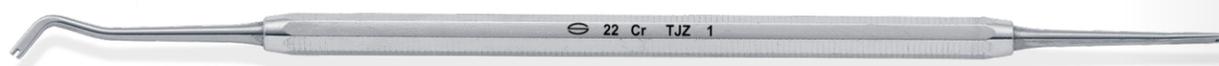

450-2724 TJZ1

500 器械盘 Instrument Trays



500-109 圆口
22cmx11cm



500-110 方口
22cmx11cm

配套器械

180



180-2415 显微根管治疗套装

12×1

显微根管治疗套装

产品名称	规格型号
根管充填器	KRCP T30
根管充填器	KRCP 4/7
根管充填器	KRCP 5/8
根管充填器	KRCP 6/10
牙探针	KEX LD5
牙探针	KEX LD16
剔挖器	KEXC L32L
水门汀充填器	L2
口镜柄 (硅胶柄)	MHS SS
口镜头	连体铈镜
托槽夹持镊 (自锁)	ZS6
消毒盒 (10*1)	III型

牙周器械包 Φ8.0mm

产品名称	规格型号
牙科刮治器	KC G5/6
牙科刮治器	KC G7/8
牙科刮治器	KC G11/12
牙科刮治器	KC G13/14

180-2520 牙周器械包

4×1 Φ8.0mm

180-2522 牙周器械包

4×1 Φ9.5mm



牙周器械包 Φ9.5mm

产品名称	规格型号
牙科刮治器	KC G5/6
牙科刮治器	KC G7/8
牙科刮治器	KC G11/12
牙科刮治器	KC G13/14

牙周器械包 Φ8.0mm

产品名称	规格型号
牙科刮治器	KC G1/2
牙科刮治器	KC G3/4
牙科刮治器	KC G5/6
牙科刮治器	KC G7/8
牙科刮治器	KC G9/10
牙科刮治器	KC G11/12
牙科刮治器	KC G13/14
牙科刮治器	KC G15/16
牙科刮治器	KC G17/18



180-2820 牙周器械包

9×1 Φ8.0mm



180-2822 种植配套器械
17×1 II型

牙科种植器械包 II 型

产品名称	规格型号
医用吸引头	II 型
口腔麻醉注射架	C/W2 型
整形镊	宽柄有钩
手术刀柄	3#
拉钩	唇颊拉钩 (大弯)
硬质合金镶片持针钳	细针直型 140mm
止血钳	12.5cm 弯型
口镜柄	不锈钢 (圆柄 SS)
口镜头	JFP4#
牙用尺	KDC2
牙用尺	SDC
牙刮匙	普通型: R3
牙用分离器	杆类型式: KPPR3
牙用分离器	杆类型式: P24G
牙龈剪	精品弯型
牙用镊	双弯有定位 (精品 I 型)
骨粉碗	
消毒盒	17*1



180-4100 骨劈开凿器械包
5×1

骨劈开凿器械包

产品名称	规格型号
骨劈开凿	KGPZ 15
骨劈开凿	KGPZ 20
骨劈开凿	KGPZ 25
骨劈开凿	KGPZ 30
手术刀柄	X3

牙周器械包 14*1

产品名称	规格型号
口镜柄	不锈钢 (圆柄 SS)
口镜头	FS4#
眼用剪	10cm (弯尖头) 精品
牙周袋探针	KPC15
牙周锉	FS3/4S
牙用分离器	扁柄型式: F1
牙用分离器	杆类型式: KGS7
牙刮匙	普通型: R2
牙刮匙	普通型: R3
牙用镊	双弯 (有定位)
持针钳	细针直型 14cm
手术刀柄	3#
拉钩	唇颊拉钩 (小弯)
医用吸引头	III 型
消毒盒	10*1



180-3100 牙周器械包
14×1

上颌窦提升器器械包

产品名称	规格型号
上颌窦提升器	KNTS 25
上颌窦提升器	KNTS 30
上颌窦提升器	KNTS 35
上颌窦提升器	KNTS 40
牙骨锤	III 型 (不锈钢)



180-4200 上颌窦提升器器械包
5×1



180-5200 拔牙器械包

17×1

拔牙器械包

产品名称	规格型号
牙骨凿	4#
牙骨锤	牛角
牙用镊 (16CM)	双弯无定位
牙挺 (直头) 头部宽 2.5MM	1#SS2.5(空心六角柄)
牙挺 (直头) 头部宽 4MM	3#SS4(空心六角柄)
牙挺 (直头) 头部宽 3MM	2#SS3(空心六角柄)
口镜柄	(六角柄)
口镜头 (不锈钢)	精品放大 4#
口镜头 (不锈钢)	精品平光 4#
牙探针	E5#(双头 4.5 八角柄)
牙刮匙 (锐匙)	SE1(双头 5.5 八角柄)
拔牙钳成人型	1#
拔牙钳成人型	17#
拔牙钳成人型	65#
拔牙钳成人型	150#
拔牙钳成人型	18L#
拔牙钳成人型	18R#
消毒盒	17*1

蜡型烤瓷包 II 型

产品名称	规格型号
技工蜡型雕刻刀 (滴蜡器)	1#
技工蜡型雕刻刀 (滴蜡器)	2#
技工蜡型雕刻刀 (滴蜡器)	3#
技工蜡型雕刻刀 (小蜡匙)	Y1
铅笔	
技工蜡型雕刻刀 (大蜡匙)	31#
技工蜡型雕刻刀 (空心柄蜡成形器)	KWC5
技工蜡型雕刻刀 (小号)	KWC7
技工蜡型雕刻刀 (大号)	KWC8
美工刀	



180-8200 蜡型烤瓷包

II 型

关于器具的劣化

生锈 (腐蚀)

制造不锈钢器具的材料不锈钢, 虽然耐腐蚀性很强, 但是由于特定的化学物质, 或者其他各种条件, 生锈的情况也时有发生。

在了解不锈钢的特性的基础上, 为器具能够长期使用, 建议进行日常保养。

主要腐蚀原因

1. 水分中含有氯, 以及老化的自来水管中锈粒子的附着。
2. 与特定的化学药品发生反应。
3. 超酸性水 (酸化水) 等机能水的使用。
4. 浸泡在被污染过的药水、消毒水中。
5. 从少许裂纹开始腐蚀 (裂纹内部没有进行防锈处理, 容易生锈)。
6. 与生锈的器具摆放在一起。

斑痕、斑块

金属表面可能会出现有色斑痕。

产生斑痕斑块的主要原因

1. 清洗液的残存成分在灭菌过程中可能产生化学反应。洗净后要充分的进行洗刷。
2. 自来水中含有的矿物质等微量杂质残存附着, 在灭菌过程中可能会发生化学变化。洗刷灭菌是建议尽可能使用纯水 (精制水), 并且, 洗刷后请立即去除水分, 进行灭菌

产品使用注意点

1. 产品使用前都要检查外表面和关节是否有异常。如果发现裂纹、伤痕、破损、磨损、大面积腐蚀等情况, 请不要再使用了。
2. 粘附在产品表面的污垢要立即去除。化学药品、血液等污垢会导致生锈以及产品的性能低下。
3. 产品的表面请不要雕刻或划伤。这可能会导致产品的生锈或者破损。
4. 产品使用消毒时, 不得经受冲击、摔打。器械和器械之间应避免碰撞与摩擦。

* 次氯酸钠、苯扎氯铵、苄索氯铵、葡萄糖酸氯己定、碘酊、碘仿、过醋酸、含酒精的药水等可能引起金属被腐蚀, 请避免使用。

用正确的方法清洗、灭菌、消毒

器具根据不同的形状、素材、用途有不同的清洗、消毒、灭菌方法, 错误的处理方式可能会导致器具的破损。